

ABDECKUNGEN UND HILFSMITTEL



SonoGuard Ultraschall Abdeckungen



SonoGuard sterile Ultraschall Abdeckungen

SonoGuard

Für den Einsatz mit Kontaktmittel im Bezug

SonoGuard Plus

Mit der einzigartigen Clear View Schallleitfläche. Unübertroffene Schallübertragung ohne Gel auf der Innenseite der Abdeckung.

Sterile Ultraschallabdeckungen für ultraschallbegleitete Eingriffe in der Regionalanästhesie, Gynäkologie, Urologie und in weiteren Gebieten. Sichert im klinischen Alltag die Sterilität bei einfacher Handhabung

- Steriles Arbeiten ohne Artefakte
- Ungestörtes Schallbild
- Teleskopische Faltung
- Verschiedene Längen

SonoGuard Ultraschallabdeckung



SonoGuard (14.0 cm breit)

Für den Einsatz mit Kontaktmittel im Bezug


Artikel Nr.:	Breite x Länge	VE
US.10.140.025	14 cm x 25 cm	100 Stück
US.10.140.040	14 cm x 40 cm	100 Stück
US.10.140.080	14 cm x 80 cm	100 Stück
US.10.140.120	14 cm x 120 cm	100 Stück
US.10.140.160	14 cm x 160 cm	100 Stück




1. Gel auftragen



2. Abdeckung überstülpen

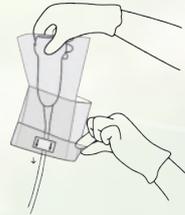

3. Abdeckung entfalten

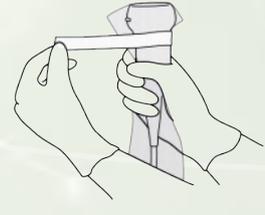

4. Abdeckung straffen

SonoGuard Plus sterile Ultraschall Abdeckungen

SonoGuard Plus Ultraschallabdeckung

Mit ClearView - Haftschalleitfläche

- ClearView - Haftschalleitfläche ermöglicht eine optimale Schallkopplung Ungestörtes Schallbild
- in der Abdeckung wird kein Gel benötigt
- hinterlässt nach dem Gebrauch keine Kleberückstände auf dem Schallkopf
- reinigen des Ultraschallkopfes nach der Anwendung entfällt
- Ultraschallabdeckung aus LDPE - Folie, Latex - und Phthalatfrei



SonoGuard Plus (18.0 cm breit)

Mit ClearView Schallfläche

Artikel Nr.:	Breite x Länge	VE
US.20.180.040	18 cm x 40 cm	100 Stück
US.20.180.080	18 cm x 80 cm	100 Stück
US.20.180.120	18 cm x 120 cm	100 Stück
US.20.180.160	18 cm x 160 cm	100 Stück




1. Schutzpapier abziehen



2. Ultraschallkopf positionieren



3. Abdeckung umstülpen

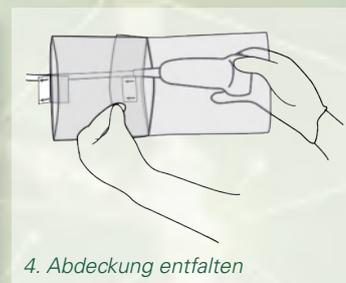


4. Abdeckung entfalten



5. Abdeckung andrücken

Vergleich im Ultraschallbild - Optimale Sicht dank einzigartiger ClearView Schalleitfläche

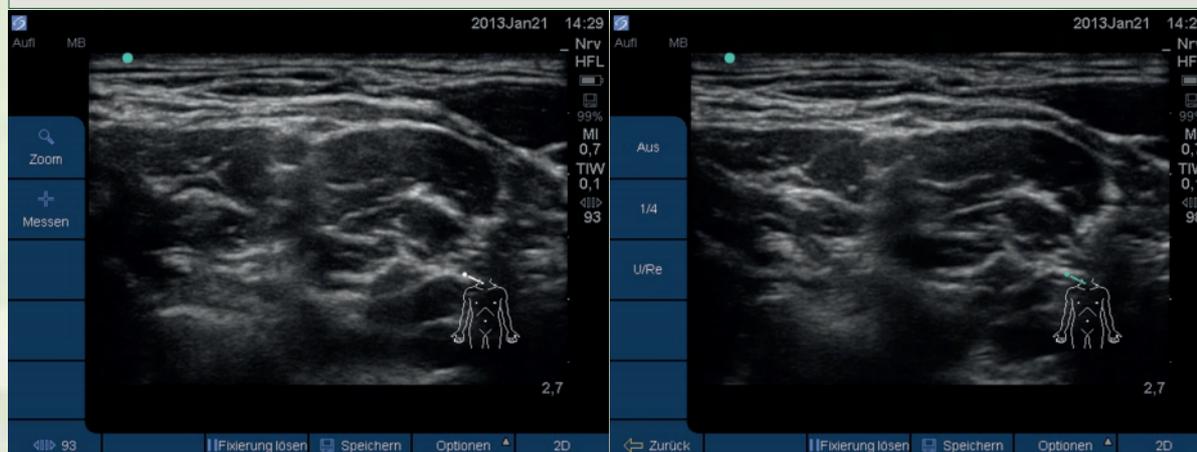

Ultraschallaufnahme ohne SonoGuard Plus Abdeckung Ultraschallaufnahme mit SonoGuard Plus Abdeckung

SonoGuard Set



SonoGuard Plus Set

Ultraschallabdeckung mit Gel im sterilen Set

- mit kohäsiver **ClearView** - Haftschallleitfläche
- steriles Ultraschall - Set zum einmaligen Gebrauch
- Ultraschallabdeckung aus LDPE - Folie, Latex- und phthalatfrei
- teleskopische Faltung
- chemisch beständig gegenüber gängigen Desinfektionsmitteln

Art.- Nr.:	Breite x Länge	VE
US.20.180.040-G	18 x 40 cm	100 Stück
US.20.180.080-G	18 x 80 cm	100 Stück
US.20.180.120-G	18 x 120 cm	100 Stück
US.20.180.160-G	18 x 160 cm	100 Stück

Inhalt

- 1 x **SonoGuard Plus** Ultraschallabdeckung
- 2 x Klebestreifen
- 2 x Gummiband
- 1 x KONIX® steriles Ultraschallgel 20 ml

SonoGuard Set

Ultraschallabdeckung mit Gel im sterilen Set

- steriles Ultraschall - Set zum einmaligen Gebrauch
- Ultraschallabdeckung aus LDPE - Folie, Latex- und phthalatfrei
- teleskopische Faltung
- chemisch beständig gegenüber gängigen Desinfektionsmitteln



Art.- Nr.:	Breite x Länge	VE
US.10.140.040-G	18 x 40 cm	100 Stück
US.10.140.080-G	18 x 80 cm	100 Stück
US.10.140.120-G	18 x 120 cm	100 Stück
US.10.140.160-G	18 x 160 cm	100 Stück

Inhalt

- 1 x **SonoGuard Plus** Ultraschallabdeckung
- 2 x Klebestreifen
- 2 x Gummiband
- 1 x KONIX® steriles Ultraschallgel 20 ml

Hilfsmittel für SonoGuard Produkte

Zubehör für Geräteabdeckungen

- akustisch optimale Kopplungswerte
- neutral zu Haut und Schallkopf
- koppelt ohne zu verkleben
- hypoallergen
- wasserlöslich, geruchsneutral und farblos

Art.- Nr.:	Beschreibung	VE
US.99.100.020	Vue Gel, steriles Gel im Beutel, 20 ml	30 Stück



Art.- Nr.:	Beschreibung	VE
US.99.000.020	Transonic, steriles Gel im Beutel, 20 ml	48 Stück



Art.- Nr.:	Beschreibung	VE
US.99.000.250	Transonic Gel, nicht steriles Gel in der Flasche, 250 ml	25 Stück
US.99.000.500	Transonic Gel, nicht steriles Gel in der Flasche, 500 ml	20 Stück
US.99.001.000	Transonic Gel, nicht steriles Gel in der Flasche, 1'000 ml	20 Stück



OptiGuard QuickChange Kamera Abdeckungen

Kamerabezüge zum schnelleren Optikwechsel während des Eingriffes

OptiGuard QuickChange^{Pro}

Steriler Kamerabezug zum Optikwechsel mit hoher Bildstabilität, auch für hochauflösende Kameras geeignet

- Bildstabilisierung durch hohe Koppelsteifigkeit
- Schnappverschluss zum schnellen Wechsel
- reißfest und antistatisch
- aus LDPE - Folie, Latex und Phthalatfrei



Artikel Nr.:	Faltart	Breite x Länge	VE
OG.40.140.250	Balgfaltung im Ring	14 cm x 250 cm	50 Stück
OG.40.180.250	invers teleskopisch	18 cm x 250 cm	60 Stück

OptiGuard QuickChange^{Arthro}

Wechsel des Endoskops mit wasserdichter Okularaufnahme.

Optimiert für Eingriffe unter stetigem Spülen, wie z.B. in der Arthroskopie

Ein Dichtungssystem zwischen dem Okular des angeschlossenen Endoskops und des Kopplers verhindert das Eindringen von Flüssigkeit in das Sichtfeld der Kamera bei Einsatz unter stetigem Spülen.

Die wasserdichte Okularaufnahme der OptiGuard QuickChange^{Arthro} spart kostbare Zeit, da der Eingriff nicht zum Reinigen und Entfernen von Flüssigkeit auf den Optiken unterbrochen werden muss.

- Kein Befeuchten der optischen Bauteile durch patentierte wasserdichte Okularaufnahme
- Bildstabilisierung durch hohe Koppelsteifigkeit
- Schnappverschluss zum schnellen Wechsel
- reißfest und antistatisch
- aus LDPE - Folie, Latex und Phthalatfrei



Artikel Nr.:	Faltart	Breite x Länge	VE
OG.41.140.250	Balgfaltung im Ring	14 cm x 250 cm	50 Stück
OG.41.180.250	invers teleskopisch	18 cm x 250 cm	60 Stück

OptiGuard Kamera Abdeckungen



OptiGuard QuickChange Standard

- Polyethylen-Film mit weicher Haptik, reissfest, antistatisch
- Geschlossene sterile Barriere mit bewährter Bajonett-Kopplung für Optik mit Videokabel
- Ultraklare Trennlinsen für scharfe Bildübertragung
- Überzug aus dem Ring ausrollbar, zwei Fixierbänder, latexfrei


Artikel Nr.:	Breite x Länge	VE
OG.30.150.200	15 cm x 200 cm (15 cm flach = 9,5 cm Durchmesser)	50 Stück
OG.30.150.250	15 cm x 250 cm (15 cm flach = 9,5 cm Durchmesser)	50 Stück

Anwendung der OptiGuard Kamera Abdeckungen

OptiGuard QuickChange mit Balgfaltung im Ring



1. Endoskop anschliessen

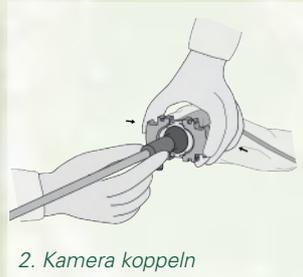

2. Kamera koppeln



3. Kamerakopf abdecken



4. Folie entfalten


OptiGuard QuickChange mit inverser Teleskopfaltung



1. Kamera koppeln



2. Folie überstülpen

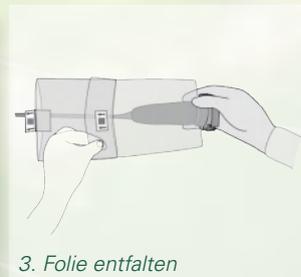

3. Folie entfalten



4. Endoskop koppeln

OptiGuard Kamera Abdeckungen




OptiGuard Access


- mit Kartoneinführhilfe
- teleskopisch gefaltet
- Abreissöffnung zum Anschluss der Optik
- reissfest und antistatisch
- aus LDPE - Folie, Latex- und Phthalatfrei

Artikel Nr.:	Faltart	Breite x Länge	VE
OG.10.130.250	teleskopisch mit Kartoneinführhilfe	13 cm x 250 cm	200 Stück


Anwendung der OptiGuard Access Abdeckung

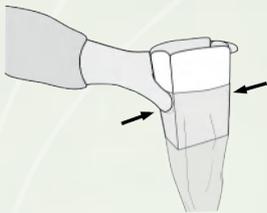


1. Kartoneinführhilfe öffnen

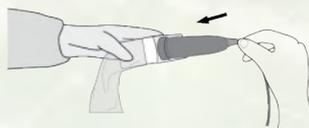


2. Kamera einführen

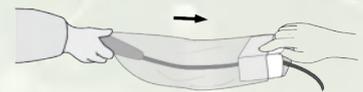


3. Abdeckung entfalten

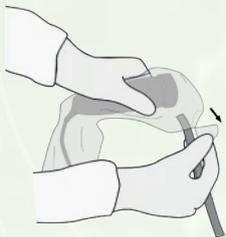

4. Spitze abreißen

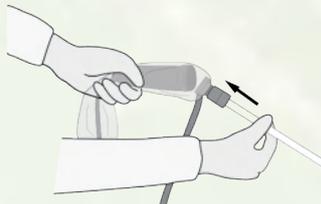

5. Endoskop einführen & koppeln

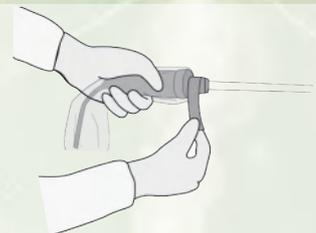

6. Abdeckung versiegeln



ClearVision

- Steriles Antibeschlagmittel für Endoskope und Optiken
- Applikationsschwamm mit Klebefläche für alle Unterlagen
- Einzeln steril verpackt
- Latexfrei, alkoholfrei, Fläschen 6 ml

Artikel Nr.:	Breite x Länge	VE
OG.99.001.000	6 ml Fläschchen mit Applikationschwamm	20 Stück

SonoGuard - weitere Produkte

SonoGuard freehand

- Speziell passend für die Schallköpfe der ACUSON Freestyle Ultraschallgeräte
- Optimale Transmission
- Ungestörtes Schallbild
- Steriles Arbeiten ohne Artefakte
- Mit der einzigartigen ClearView Schallleitfläche - Unübertroffene Schallübertragung ohne Gel auf der Innenseite der Abdeckung



Artikel Nr.:	Breite x Länge	VE
US.40.150.260	150 x 260 mm	50 Stück
SonoGuard freehand ist chemisch beständig gegenüber gängigen Desinfektionsmitteln		

ProKit basic Sets

Ergänzungssets für die Regionalanästhesie mit Ultraschallabdeckung



Setinhalt		Typ 400 SonoGuard*	Typ 400 SonoGuard Plus*
2 x	Injektionskanüle ø 0.5 mm x 25 mm, orange (25G)	X	X
1 x	Injektionskanüle ø 0.8 mm x 40 mm, grün (25G)	X	X
1 x	Filterkanüle, stumpf 45°, ø 1.20 mm x 40 mm, Filter 5µm	X	X
1 x	Injektionsspritze, 5 ml, dreiteilig, Luer-Slip	X	X
1 x	Injektionsspritze, 10 ml, dreiteilig, Luer-Slip	X	X
1 x	Injektionsspritze, 20 ml, dreiteilig, Luer-Slip	X	X
3 x	Schaumstieltupfer, weiss	X	X
5 x	Mullkompressen, 17- fädig, 8-fach, 7.5 cm x 7.5 cm	X	X
1 x	Wundverband, atmungsaktiv, transparent, 10 cm x 15 cm	X	X
1 x	3 - geteilte Schale (PP), 19.5 cm x 13.0 cm x 3.0 cm	X	X
1 x	ProDrape Vision Lochtuch, 75 cm x 90 cm mit zentralem Sichtfenster 35 cm x 35 cm, Loch 10 cm mit Klebeblatt, 2 - lagig (Vliesstoff und PE)	X	X
1 x	ProDrape Cover Mehrzwecktuch, 90 cm x 90 cm, 2 - lagig	X	X
1 x	SonoGuard Ultraschallabdeckung, 14 cm x 80 cm	X	
1 x	SonoGuard Plus Ultraschallabdeckung, 18 cm x 80 cm		X
Artikel Nr.:		BS.10.140.080	BS.20.180.080

Vertrieb Europa:



mareva GmbH

Gewerbestrasse 31
DE-78244 Gottmadingen



+49 7704 979 90 20



+49 7704 979 90 21



info@mareva-medical.com



www.mareva-medical.com



siramo AG | Untere Breite 3a | 9215 Buhwil
Tel. +41 52 680 27 40 | www.siramo.ch | info@siramo.ch